


COPERNICO IMPLANT PROCESS II

PATENT PENDING

coxxco

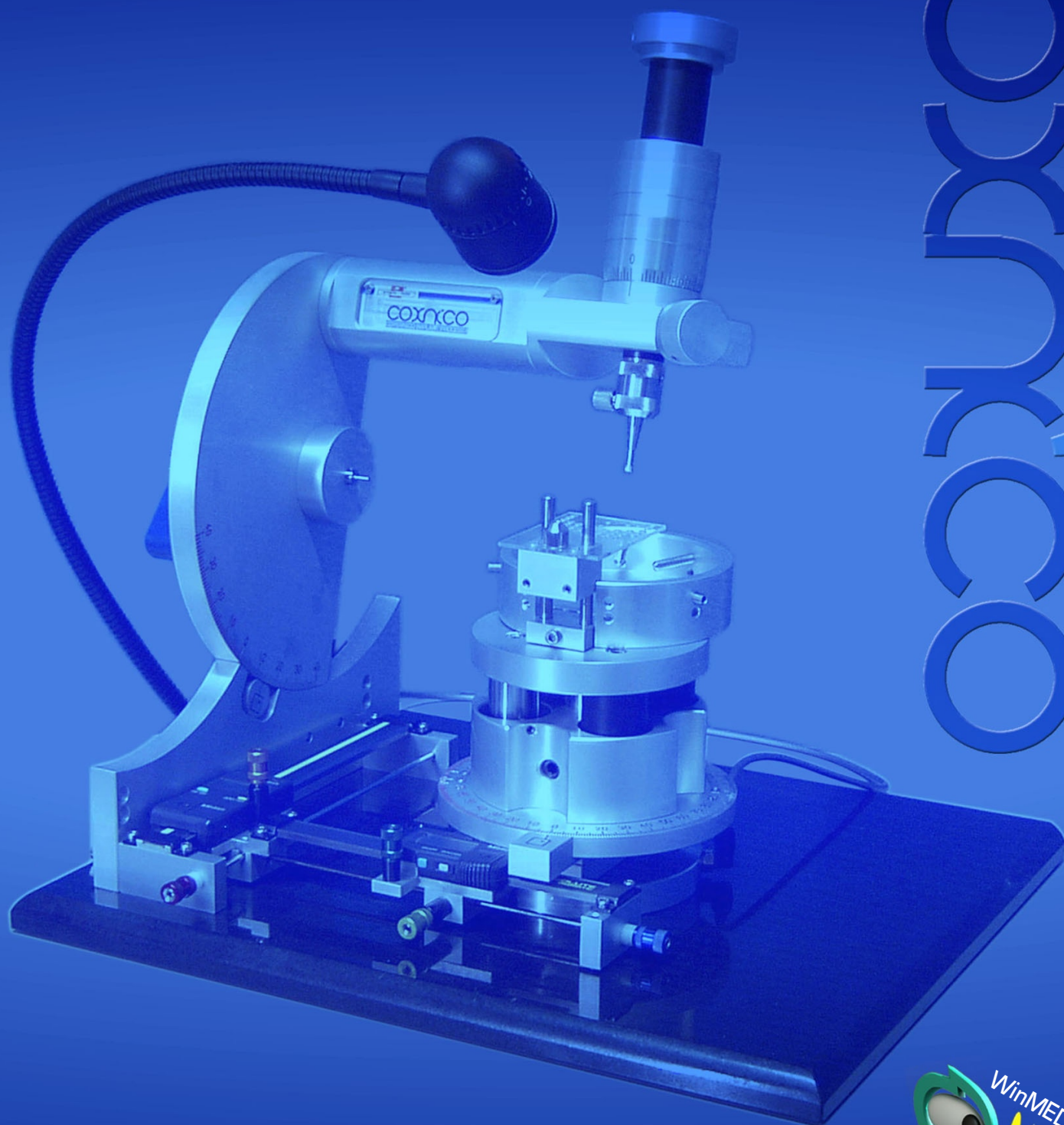

SISTEMA DI PUNTAMENTO PER DIME CHIRURGICHE, mediante elaborazione software,
INDISPENSABILE PER IL


POSIZIONAMENTO IMPLANTARE PROTESICAMENTE GUIDATO

AFFINCHÉ LA PIANIFICAZIONE PREOPERATORIA SIA ESATTAMENTE TRASFERITA IN FASE CHIRURGICA.

Il sistema permette di individuare la posizione del punto d'ingresso e l'inclinazione di traiettoria dell'impianto e quindi:

⇒ consente la corretta collocazione della dima chirurgica nella mascherina di riferimento e

⇒ fornisce una guida precisa per la fresa chirurgica, durante la foratura dell'osso del paziente, nella fase di preparazione del sito implantologico.

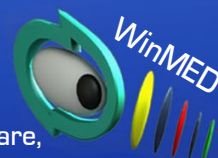

coxrico

COPERNICO IMPLANT PROCESS II

Software di elaborazione dati digitali delle TAC che permette:

- la visualizzazione in 3D dell'arco dentale


WinMED



- il posizionamento anatomico VIRTUALE degli impianti


- l'elaborazione dei parametri di CORREZIONE POLARE e LINEARE per il posizionamento della dima chirurgica

SPOT stage

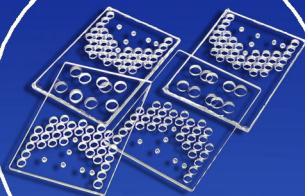


PIASTRINE MONOUSO CON REPERI RADIOPACHI PER LA CENTRATURA DELLA DIMA CHIRURGICA, da montare sul posizionatore del piatto "SMART-C" prima di essere fissate alla mascherina di riferimento

SMART-C

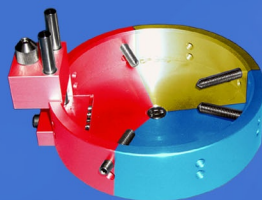

PIATTO PORTAMODELLI, con bloccaggio a vite dotato di POSIZIONATORE EPICENTRICO per piastrine "SPOT stage", fissato mediante sistema magnetico alla base "COMPASS base"

COMPASS base

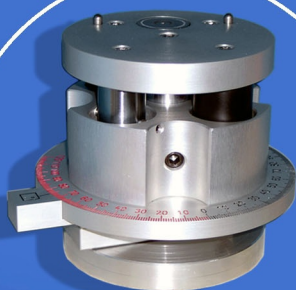


BASE GONIOMETRICA MAGNETICA di supporto del piatto "SMART-C"

- regolabile in altezza
- dotata di sistema pneumatico di BLOCCAGGIO e SCORRIMENTO

CENTRO DI PUNTAMENTO PER DIME CHIRURGICHE dotato di:

- BASAMENTO IN GRANITO di massima planarità
- SISTEMI DI MISURA LINEARE DIGITALI su entrambe le coordinate cartesiane
- SISTEMI DI MISURA ANALOGICI su entrambe le coordinate polari
- base goniometrica "COMPASS base" completa di piatto "SMART-C" e piastrine "SPOT stage"

COPERNICO

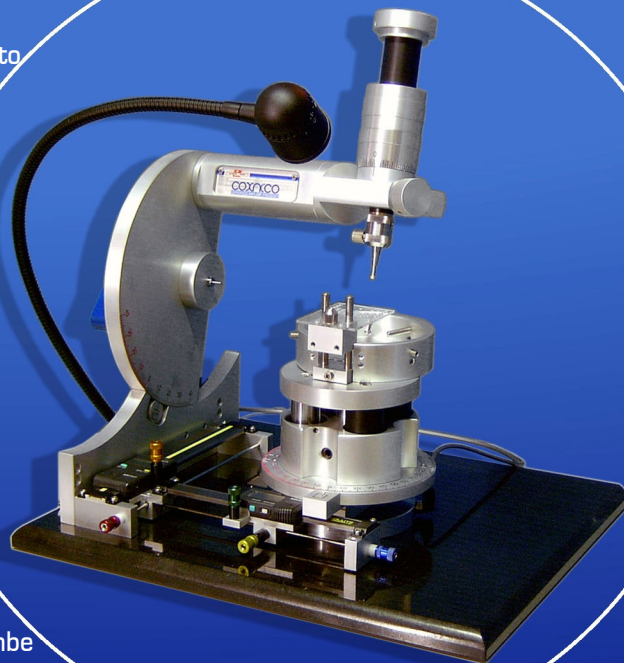

www.surgisystems.com

artiglio - italia

ARTIGLIO S.n.c. di Benecchi Lino & C.

Strada Naviglia, 3 - I 43100 PARMA

Tel. +39 0521 782504 - Fax +39 0521 774625 - Video: +39 0521 789763

E-mail: marketing@artiglio-italia.it - Internet: www.artiglio-italia.it