


GALILEO

IMPLANT PROCESS II

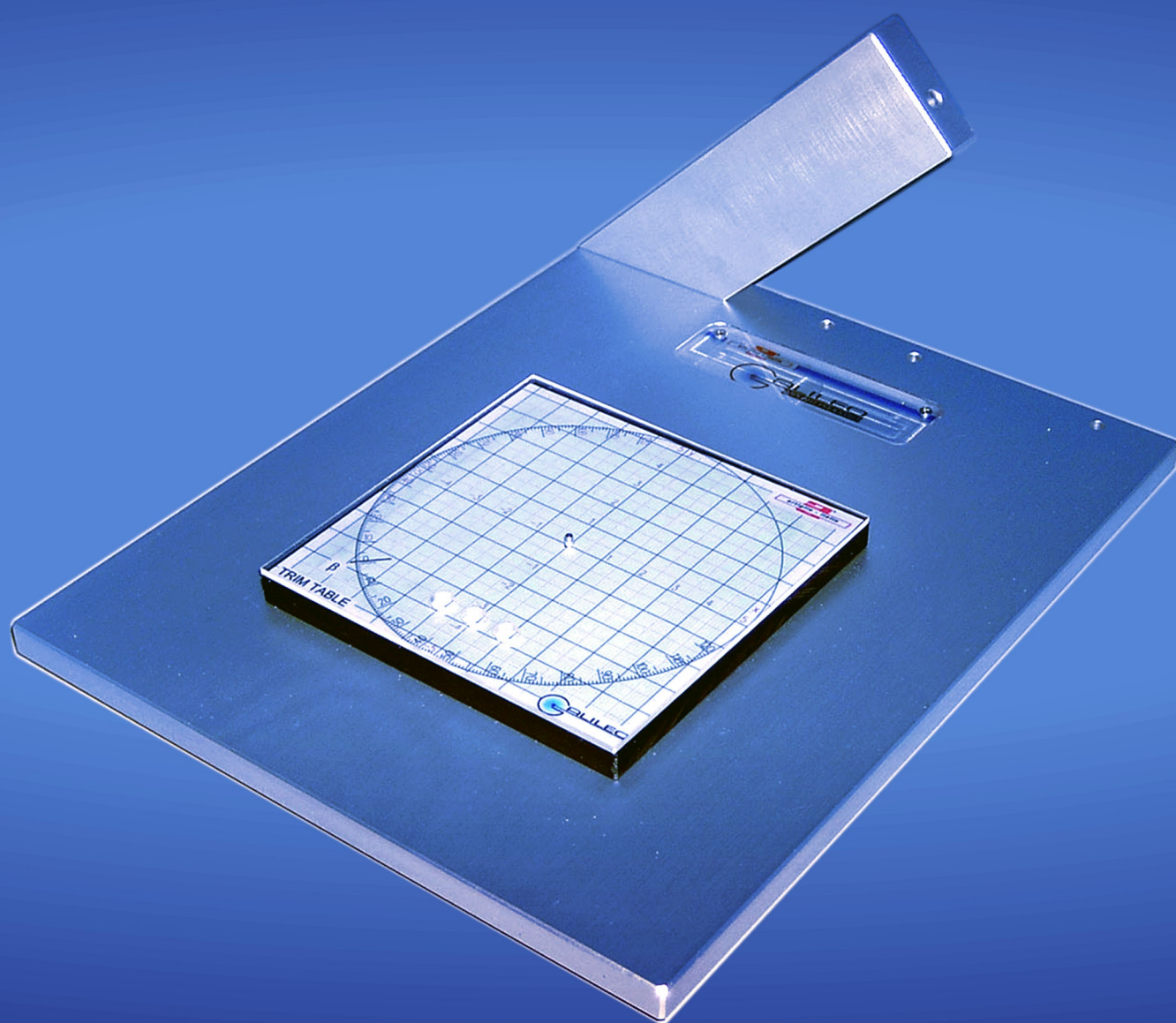

SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DELLE DIME CHIRURGICHE

assistito da computer, finalizzato a

INDIVIDUARE LA POSIZIONE DEL PUNTO D'INGRESSO E L'INCLINAZIONE DI TRAIETTORIA DELL'IMPIANTO
e quindi:


⇒ COLLOCARE la dima chirurgica nella mascherina di riferimento e

⇒ FORNIRE una guida per la fresa chirurgica, durante la foratura dell'osso del paziente, nella fase di preparazione del sito implantare.

GALILEO

IMPLART PROCESS II

PIASTRINE MONOUSO CON
REPERI RADIOPACHI PER LA
CENTRATURA DELLA DIMA CHIRURGICA,
da montare sul posizionatore del piatto
"SMART" prima di essere fissate alla
mascherina di riferimento

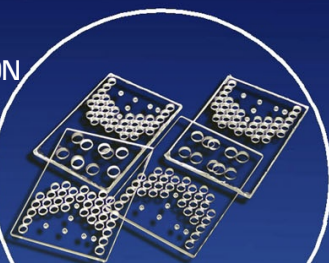

SPOT stage

PIATTO DI PUNTAMENTO
utilizzato sulla tavola
"TRIM table" per
individuare il punto
d'ingresso della
traiettoria dell'impianto



TRIM stage




RAP-IMPLA M/M

RAP-IMPLA M/M
accessorio fuori dotazione per la
correzione angolare POLARE
della mascherina ed il successivo
posizionamento della dima
chirurgica



SMART

PIATTO PORTAMODELLI,
con bloccaggio a vite dotato di
POSIZIONATORE EPICENTRICO
per piastrine "SPOT stage"
e per piatto "TRIM stage"
fissato mediante
sistema magnetico
alla base
RAP-IMPLA M/M

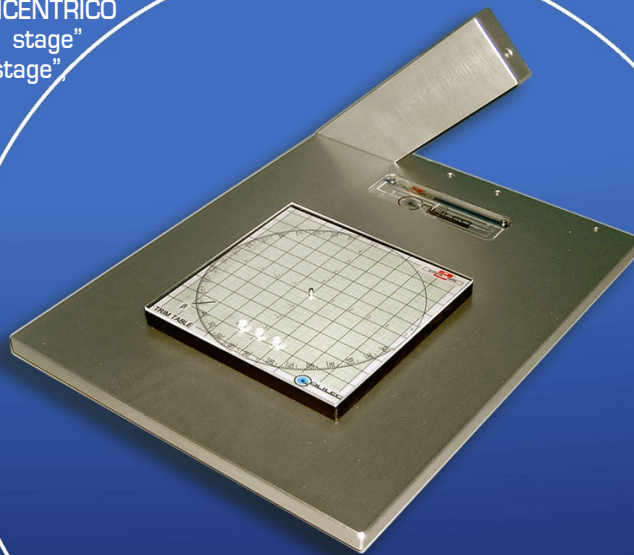

TRIM table

GALILEO

CENTRO DI PUNTAMENTO PER DIME CHIRURGICHE
dotato di:

- tavola di puntamento "TRIM table" con portaccessori finalizzata al riporto dei valori software per tracciare il punto d'ingresso della traiettoria dell'impianto
- piatto di puntamento "TRIM stage"
- piatto portamodelli di posizionamento "SMART"
- piastrina monouso "SPOT stage"

UTILIZZABILE con normali parallelometri per il posizionamento attacchi ed in particolare con UNO MON /MM8